

# SCFvh 4032 Perfection

Frigorifero-congelatore da laboratorio con NoFrost

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_


NAME # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



## I vostri vantaggi

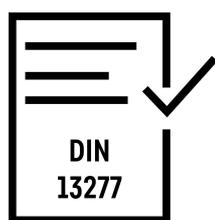

### Conformità DIN 13277

I frigoriferi da farmacia e da laboratorio di Liebherr hanno tutte le caratteristiche e rispettano tutti i criteri di prestazione necessari per la conformità alla norma DIN 13277. La norma DIN 13277 definisce i requisiti e le specifiche di prova per frigoriferi e congelatori da laboratorio e per la conservazione di prodotti farmaceutici.



### +2 °C SafetyDevice (limitatore di sicurezza)

Se la temperatura all'interno dell'apparecchiatura scende al di sotto di +2 °C a causa di un malfunzionamento, subentra la funzione +2 °C SafetyDevice (limitatore di sicurezza), che mantiene stabile la temperatura e attiva un allarme. Questa funzione impedisce alle sostanze sensibili di congelare e invia immediatamente una notifica.



### Massima efficienza

I frigoriferi e congelatori ad alta efficienza energetica ti aiutano a far fronte ai prezzi sempre più elevati dell'elettricità. Liebherr sfrutta appieno il potenziale di risparmio di ogni componente: dal compressore, alla guarnizione, fino all'illuminazione e all'elettronica. Le apparecchiature ultra-efficienti della serie Perfection, ad esempio, dimostrano come questo abbia un effetto positivo sui costi di gestione complessivi.



### Tecnologia NoFrost

Con le apparecchiature professionali da laboratorio Liebherr non è più necessario sbrinare. L'umidità viene trattenuta dal sistema di raffreddamento ventilato e i cicli di sbrinamento automatico eliminano dall'interno fino all'ultima particella di umidità. Per una conservazione pratica, sicura e senza ghiaccio.

# SCFvh 4032 Perfection

Frigorifero-congelatore da laboratorio con NoFrost

## Specifiche tecniche

Volume lordo/utile	
Frigorifero	284/206 l
Congelatore	112/58 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	597/654/2044
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	
Frigorifero	460/423/1037
Congelatore	406/292/595
Consumo energetico in 365 giorni	459 kWh
Temperatura ambiente	+10 °C a +35 °C
Dissipazione di calore	380 kJ/h
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	48 dB(A)
Frequenza / tensione	50/60 Hz / 220-240 V~
Sistema di raffreddamento	ventilato
Sbrinamento	automatico
Intervallo di temperatura	
Frigorifero	+3 °C a +16 °C
Congelatore	-9 °C a -30 °C
Materiale del corpo esterno/colore	acciaio / bianco
Materiale porta	porta isolante in vetro / acciaio
Materiale contenitore interno	PS termoformato ad uso alimentare
Tipo di comando	Display a colori 2,4", Touch & Swipe
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico ed acustico
Allarme mancata alimentazione	attivazione immediata e durata 12 ore
Contatto a potenziale zero	sì
Tipo di rete	SmartModule
Soluzione di rete	Integrato, estraibile
Interfaccia	WLAN/LAN
Registratore di dati	integrato, interfaccia USB
Illuminazione interna	LED, inseribile separatamente
Griglie regolabili di appoggio	4
Superficie griglie utilizzabile in mm (L / P)	460 / 423
Carico massimo griglie di appoggio	45 kg
Carico massimo complessivo	345 kg
Numero di cassette	3
Maniglia	maniglia antimicrobica con meccanismo di apertura
Passante per sensore	2 x Ø 10 mm
DIN 13277	sì
Chiusura	azionamento meccanico
Battente della porta	20 anni sono corrette al momento della stampa. 20 anni a destra / reversibile
Peso lordo/netto	103/97 kg
Un estratto delle caratteristiche più importanti dell'apparecchio è disponibile sul sito. Tutte le altre caratteristiche dell'apparecchio e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito.	
9005382247716	

## Accessori



Griglia con rivestimento in plastica, colore bianco  
711330800